

ケータイコールDX

自分に合ったスイッチで電話をかける、受ける。

手指の不自由な方が、携帯電話を使って外部の方と通話することができます。残存機能で操作可能なスイッチと接続して、簡単な操作で通話が可能です。ワンプッシュで電話の発信や受け取りをして通話ができ、ワンプッシュで通話を終了できます。ご家族や介護者が外出時にも連絡がとれるので安心です。

特長

- 携帯電話のイヤホンマイク端子に接続するだけのハンズフリーシステムです。
- マイク、スピーカー内蔵。スピーカーは音量調節ができます。
- 操作は本人に合ったスイッチ（別売）を接続して使用できます。
（本体のリモートスイッチでも操作できます。）
- スイッチを長押し（約2秒）すると、携帯電話に登録した所（1カ所のみ）へ電話をかけます。
- 電話がかかってきたら、スイッチを入力すると通話できます。
- 電池タイプなので面倒な電源配線の必要がありません。
- 高感度マイク採用で楽々通話。



外出先



- ◆ 携帯電話での緊急通報装置としてコール
- ◆ ご家族や介護者が外出先からの連絡に
- ◆ 用事のある時に自分で相手にコールし通話


離れていても安心。

いつでも簡単操作でコールできます。



ケータイコールD X

接続図

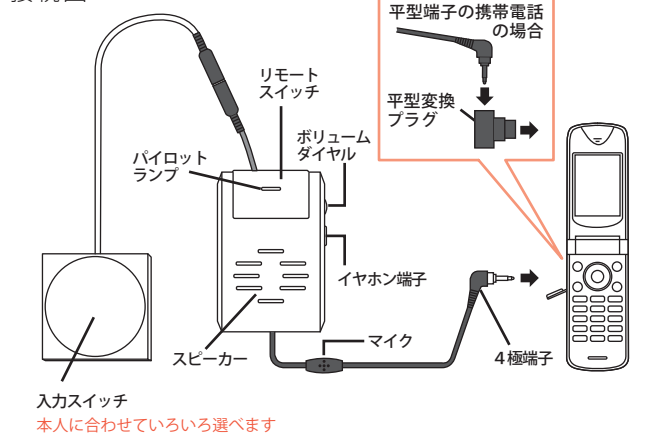

ご確認ください

本製品は、4 極端子・平型端子対応です。必ず携帯電話のイヤホンマイク端子をご確認の上お買い求めください。

- ・平型端子がない場合は、付属の変換アダプタを接続して、外部接続端子に接続してください。
- ・3 極端子の携帯電話ではご使用になれません。
- ・a u の 4 極端子の携帯電話はご使用になれません。

オート電源機能	通話と同時に自動的に電源 ON。通話が終わると自動で OFF になります
自動着信設定対応	携帯電話を自動着信設定にしておけば、着信時に入力スイッチに触れることなく通話を開始
音量調節機能	ボリュームダイヤルでスピーカーの音量を調節できます
エコーキャンセル機能	耳障りな山びこ音を大幅カット
ハウリング防止機能	ハウリングの発生を抑えて聞き取りやすい音声を出力
デジタルノイズカット機能	アンテナからの電波によるノイズを大幅カット

●電話を受ける

- ・着信時、入力スイッチ（または本体のリモートスイッチ）を入力すると電源が ON になり通話可能となります。（パイロットランプが点灯）
- ・携帯電話を自動着信に設定しておくと、入力スイッチを押すことなく通話可能となります。自動着信設定については携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

●電話をかける

- ・携帯電話が待機状態で、入力スイッチ（または本体のリモートスイッチ）を長押し（約 2 秒）すると、携帯電話のイヤホンマイク設定になっている登録メモリダイヤル番号（1 件のみ）に発信します。

●通話を終了する

- ・通話中、入力スイッチ（またはリモートスイッチ）を長押し（約 2 秒）すると通話を終了し、電源が OFF になります。
- ・相手が電話を切ると、自動的に通話が終了し、電源が OFF になります。

仕 様

商 品 名	携帯電話通話装置 ケータイコールD X
品 番	①00137D00 (NTT ドコモ用) ②00137E00 (au 用)※
電 源	9 V アルカリ乾電池
本 体 寸 法	幅 6 0 × 奥 9 0 × 高 3 4 mm
本 体 重 量	1 4 0 g
コ ー ド 長	1 . 5 m
スイッチ入力端子	φ 3 . 5 プラグ
価 格	1 4 , 0 0 0 円 (税抜)

※携帯電話に平型端子がない場合に使用する変換アダプタを付属しています。携帯電話の機種によって、①、②からお選びください。

- ①・・・NTTドコモ（一部 SoftBank）対応
- ②・・・a u 対応

※対応していない機種もありますのでお問い合わせください。

ご注意

- ※平型端子・4 極端子の携帯電話でもスイッチ操作による発着信ができない場合がありますので、携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- ※リモートスイッチの対応は、携帯電話の機種によって異なります。また、機種によっては、着信／発信の機能が使用できない場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ※商品改良のため、仕様・外観及び価格等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】

ー医療福祉に技術で貢献するー

徳器技研工業株式会社

本社
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
TEL. 0978-33-5595 FAX. 0978-33-5596
HP. <http://www.tokuki.net/>
MAIL. info@amor.co.jp

東京オフィス
〒124-0012 東京都葛飾区立石 7-7-9
TEL. 03-3691-7055 FAX. 03-3333-1397
MAIL. tokyo@amor.co.jp

【販売店】